

Sistema de Triage de Urgencias Hospitalarias Manchester

Manual visual de la aplicación para
nuevos usuarios

Diseñado por Mercedes Jiménez Jiménez

INDICE


1.-Acceso al programa.....	3
2.-Cambio de Contraseña.....	5
3.-Conocer la pantalla del Manchester	6
4.-Comenzar el triaje	8
5.-Añadir textos preestablecidos	16
6.-Valores de los parámetros más utilizados.....	19

1.- ACCESO AL PROGRAMA

1.-Desde el escritorio, una vez abierta la sesión, se da doble clic al símbolo del programa. _____




2.-Aparece la siguiente pantalla, pulsamos el botón **PASS**

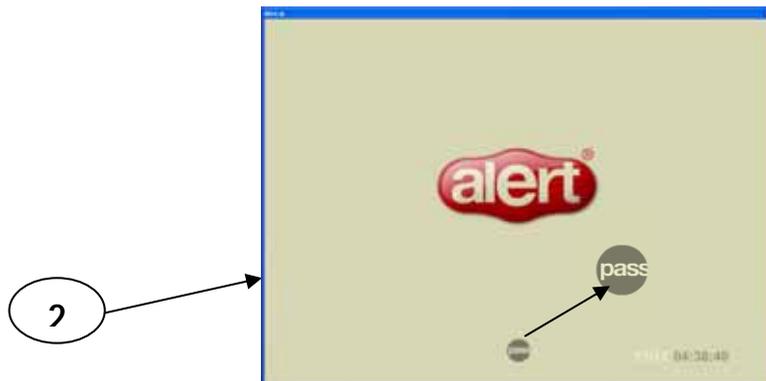

3.-En este cuadro de diálogo introducimos nuestro usuario y la clave que te da el sistema por defecto la primera vez que entras en el sistema (ya veremos luego como se cambia).

4.- Pulsamos **OK**

5.- Ya hemos entrado en la pantalla principal de la aplicación

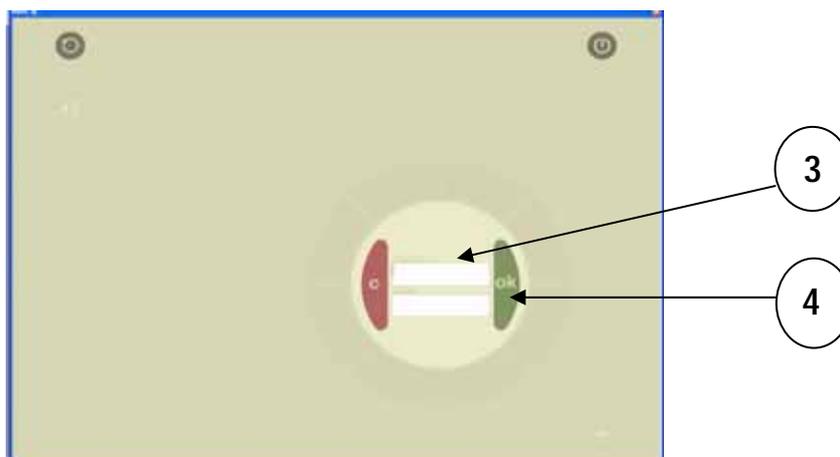

5

ALERT@ Triage (2.4.2) - Urgencias
m. mercedes

Color	Nombre	Motivo de urgencia	Sala	Tiempo	Alergias	Análisis	Episodios	Evaluaciones de la	Imágenes y otros	Medicación	Problemas	Procedimientos
[Pattern]	Fulanito de Tal	avisa por cabeza y rigidez de nuca	Triados	5 días								
[Pattern]	Episodio 141418		Triados	5 días								
[Pattern]	pepito	dolor dedo	Triados	5 días								
[Pattern]	Episodio 141908	ice	Triados	5 días								
[Pattern]	Episodio 141909 pepi	EL PACIENTE NO PRESENTA ALERGIA EL PACIENTE TOMA SINTROM	Triados	5 días								
[Pattern]	ppppppp	mareo	Triados	5 días								
[Pattern]	ooooo	dolor de cabeza EL PACIENTE PRESENTA ALERGIAS a	Triados	5 días								
[Pattern]	Episodio 141912		Triados	5 días								
[Pattern]	Episodio 141913george cloony	lo guapo que es y dolor de corazón EL PACIENTE NO PRESENTA ALERGIA	Triados	5 días								

2.- CAMBIO DE CONTRASEÑA

1.- Desde la pantalla de inicio de la aplicación pulsamos el botón **HERRAMIENTAS**




2.- Seleccionamos **BIOMETRIA**

3.-Introducimos la clave que por defecto nos da el sistema (con la que hemos entrado) y a su lado ponemos la nueva clave. Confirmamos la clave



4.-Hay que contestar a una pregunta de control


5.- Confirmamos con **OK**

La clave está cambiada

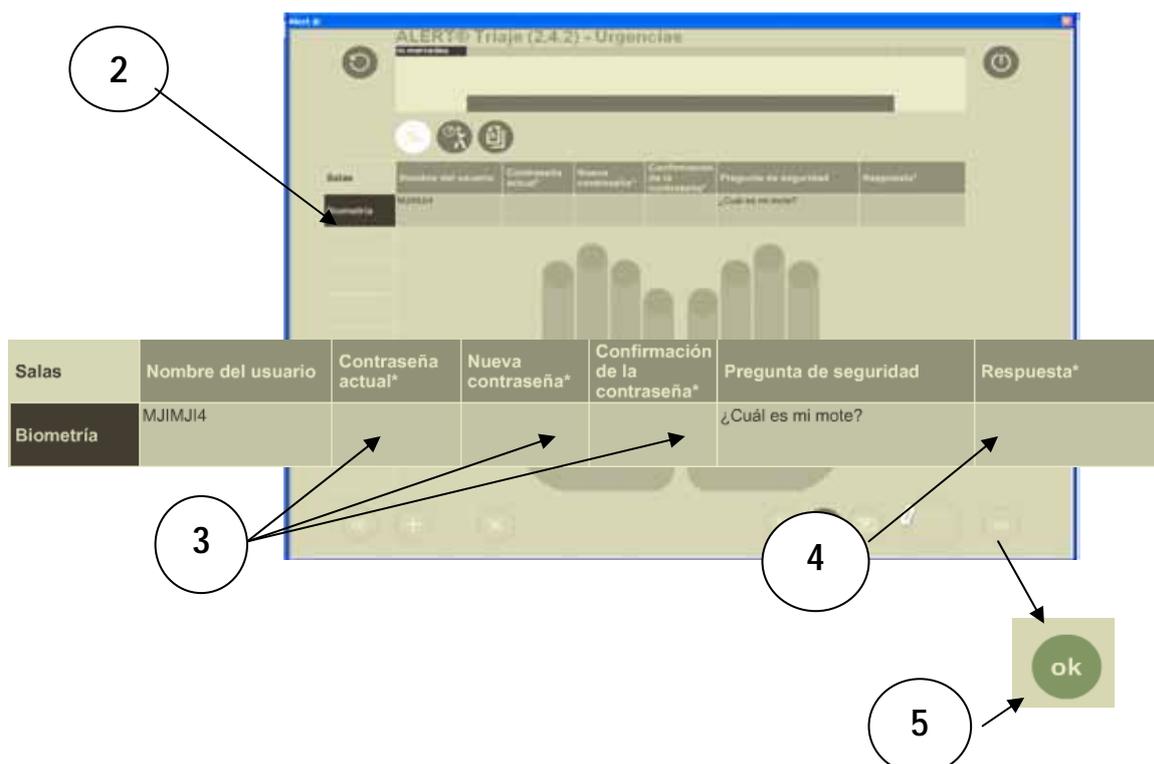

3.- CONOCER LA PANTALLA DEL MANCHESTER

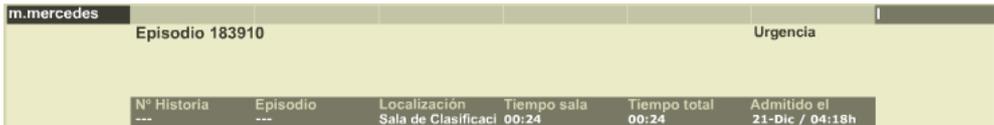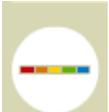1.-Botón de herramientas	
2.- Retorno a la pantalla anterior	
2.-Espacio destinado a los datos del enfermo	
	
3.-Botón de inicio del triaje	
4.-Introducción de datos	
5.-Introducir constantes vitales	
6.-Traslado del enfermo dentro del área de urgencias	
7.-Imprimir	
8.-Notas preestablecidas	
9.-Botón de ayuda sobre cualquier parámetro o discriminador del triaje	
10.-Botón de confirmación OK	
11.-Salir de la aplicación	

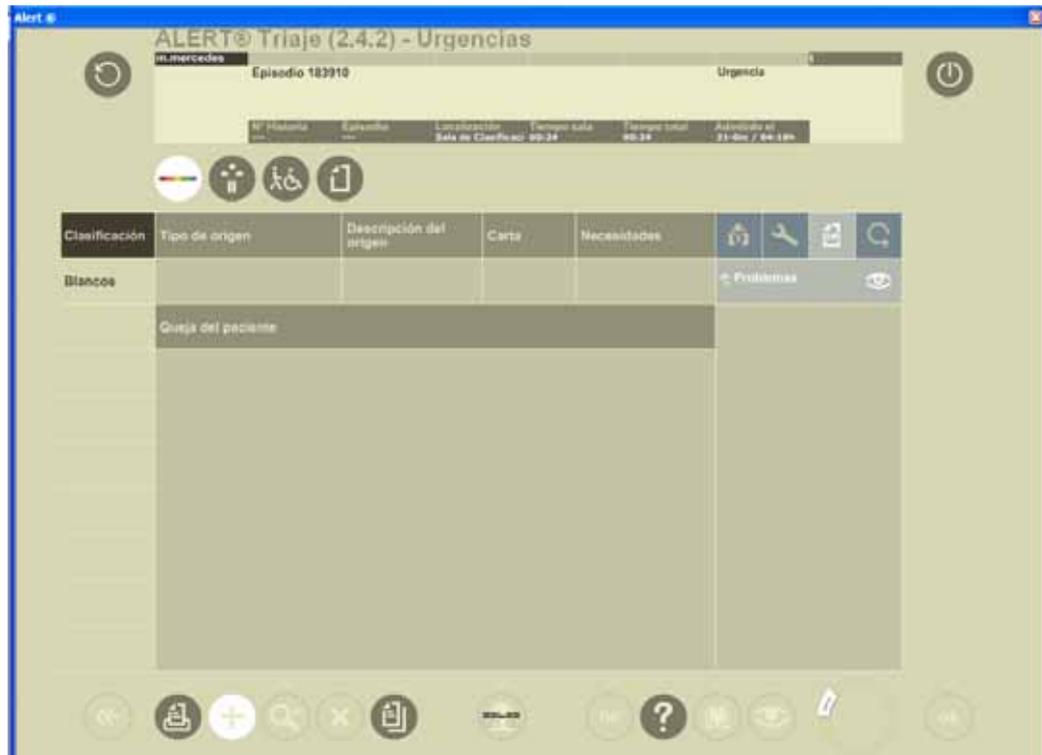

4.- COMENZAR EL TRIAJE


NO PODEMOS EMPEZAR EL TRIAJE SIN LOS DATOS DEL ENFERMO

1.- Desde la pantalla principal del programa vemos los enfermos que están triados ya y el color que se les ha asignado.

2.- Para crear un nuevo registro pulsamos el botón




3.- Aparece una pantalla en la que nos pregunta si queremos crear un paciente temporal. Contestamos que **SI**.

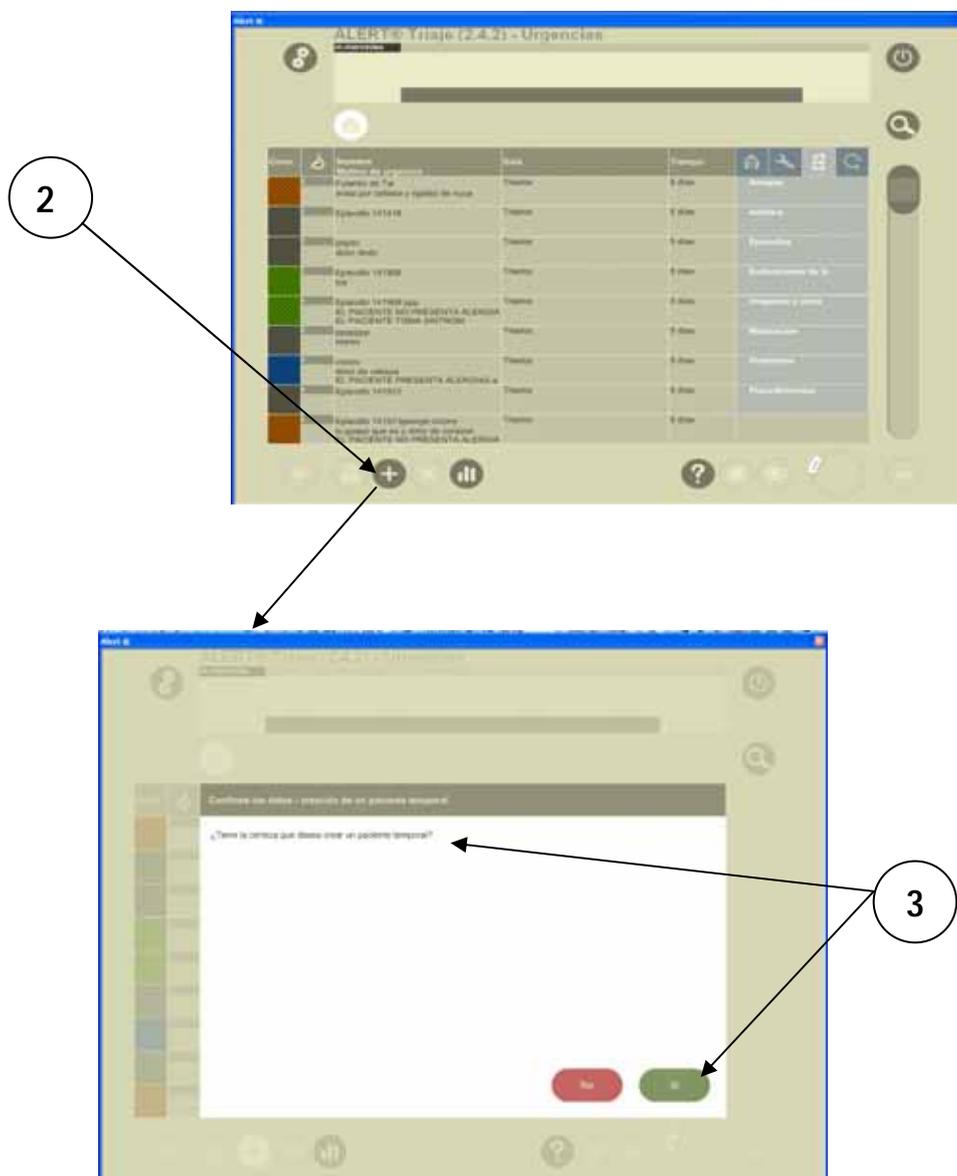

4.- Aparece una pantalla en la que introduciremos los datos personales del enfermo: Nombre y apellidos, Edad, Sexo,...en alguna ocasión en que los apellidos y el nombre se presten a confusión se aconseja poner el nº de Historia.


Para insertar el nombre ponemos el cursor encima del número de episodio y sustituimos.

5.- Validamos con **OK** y pasamos a la siguiente pantalla.

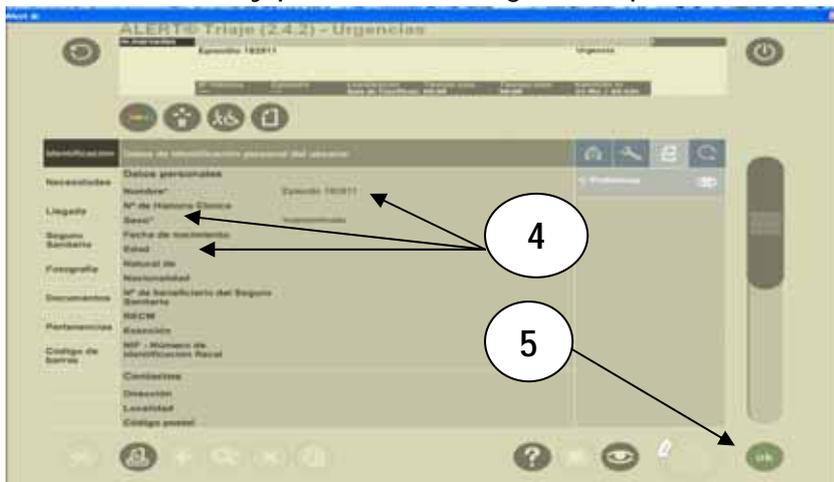

6.- Comprobamos que los datos del enfermo sean correctos y pasamos a rellenar el apartado de QUEJA DEL PACIENTE que no es otro que el motivo de asistencia al Sº de Urgencias.


7.-En la parte inferior de la imagen nos aparece un símbolo que inserta textos preestablecidos con anterioridad y que nos evitan tener que escribir todo un párrafo. Más adelante veremos cómo podemos añadir nuestros propios textos en este cuadro de diálogo.

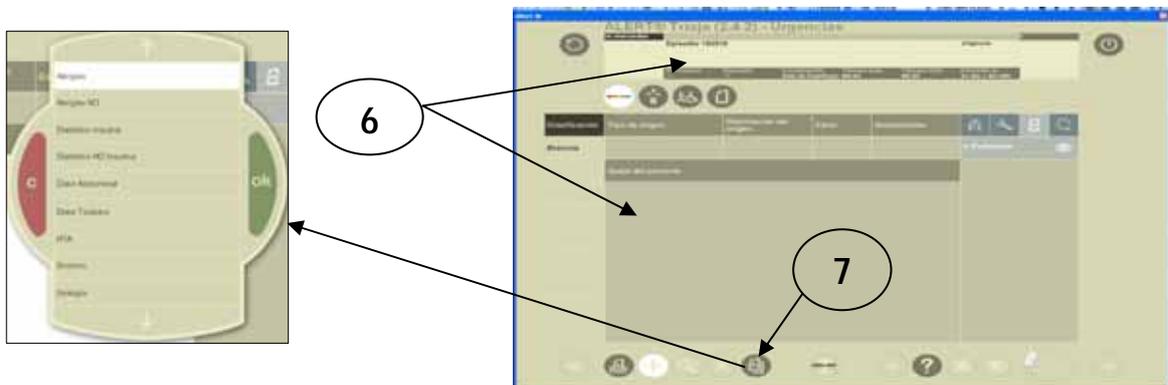

8.- Una vez que hemos completado el apartado de “queja del paciente” pulsamos OK y pasamos a la pantalla de los diagramas de clasificación.

9.- Si pulsamos este número  la pantalla cambia y nos aparece una clasificación de síntomas diferente.

Para volver a la vista anterior volvemos a pulsar el número 

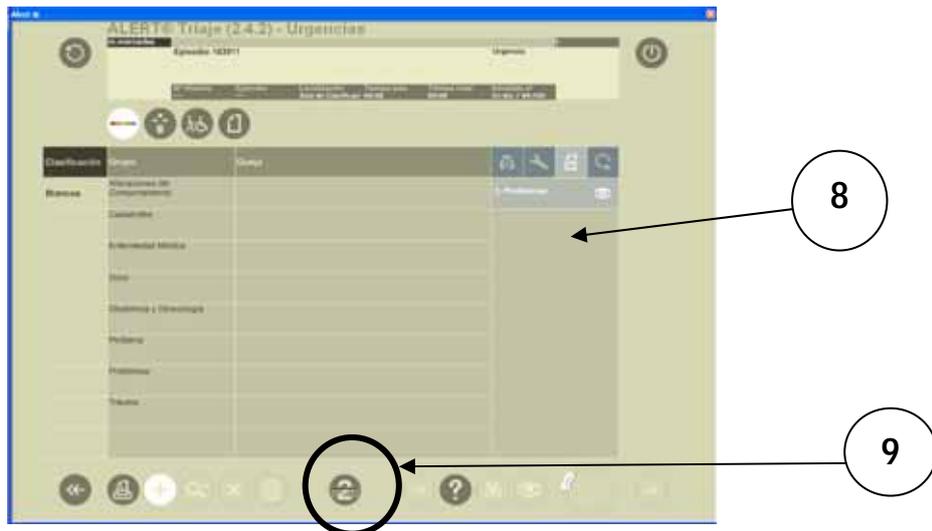


10.- Elegido el diagrama por el cual vamos a empezar el triaje pulsamos OK.

Observamos en la parte superior izquierda un recuadro que nos indica el color de la prioridad del diagrama en el que estamos. Siempre empezaremos el triaje en el color de máxima prioridad el rojo



10.1 Empezamos a leer los discriminadores, si ninguno de los que aparece están en nuestra historia pulsamos **no** considerando que si pulsamos **no** estamos negando todos los discriminadores, si seleccionamos uno de los discriminadores y pulsamos **OK**, inmediatamente el triaje se detendrá en ese color.

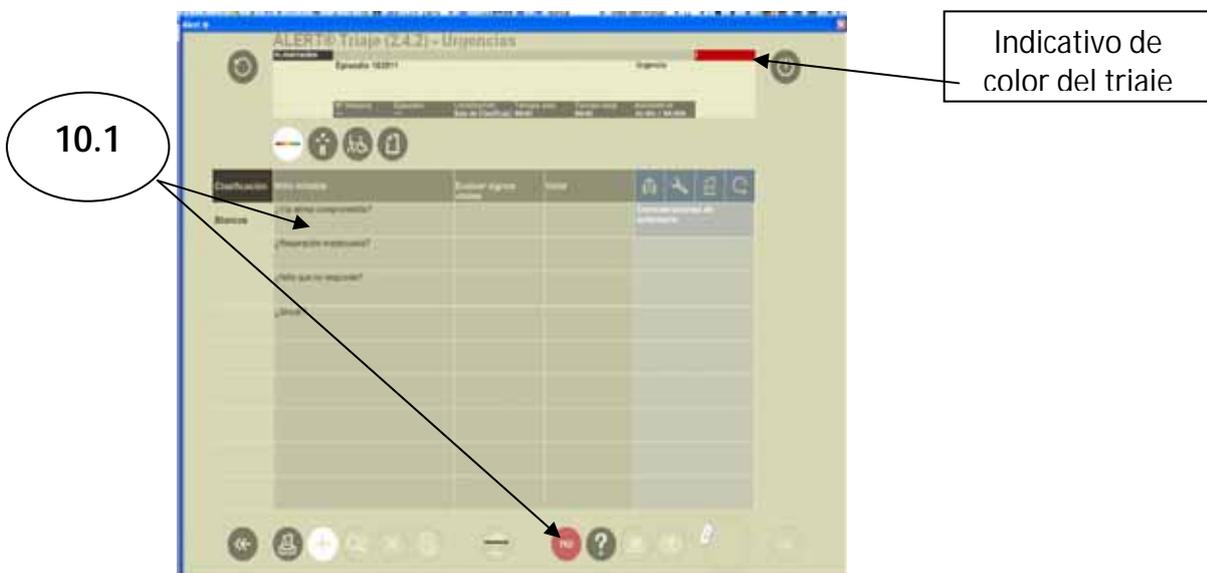


11.-Una vez que hemos llegado a la asignación del color del triaje, pulsamos O.K. y confirmamos los datos, es en ese momento cuando aún podemos rectificar o volver atrás si creemos que hay algo erróneo, después de la confirmación los datos quedarán grabados y no podremos rectificar nada.

12.-Después de confirmar metemos las constantes del enfermo.


(Si intentamos introducir las constantes sin haber confirmado todo lo anterior se nos borrarán los datos y tendremos que volver a empezar).

12.1.-Pulsamos el botón de las constantes 

12.2.-En la pantalla que aparece pulsamos el signo  y ya podemos introducir las cifras

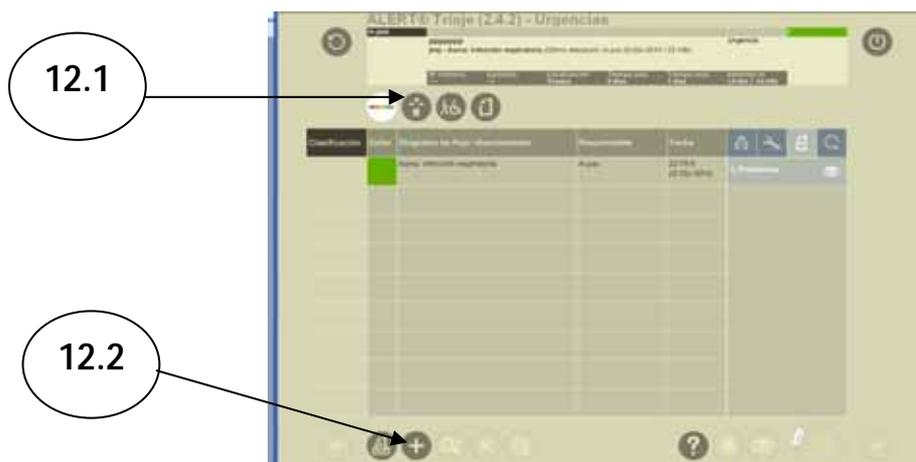

13.-.Seleccionamos el parámetro y lo rellenamos. No olvidar pulsar **OK** para que el parámetro quede grabado.

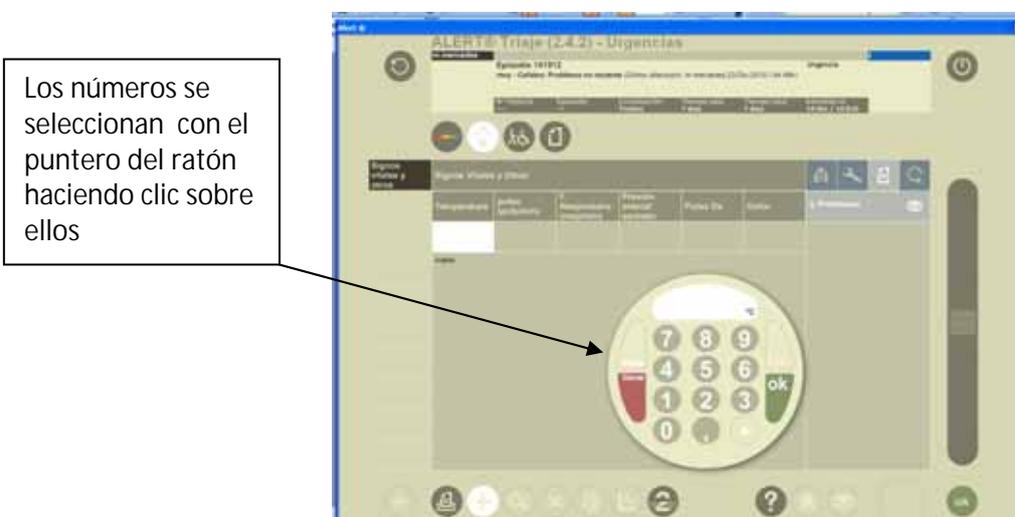


14. Pulsando el botón  aparece una pantalla que nos permite meter otras constantes menos comunes por ejemplo el peso en los niños
Para volver a la vista anterior volvemos a pulsar el número 




15.-Desde la nueva pantalla seleccionamos imprimir, nos aparece un cuadro de confirmación que nos pregunta si nuestro informe está completo

Confirmamos con **OK**

15.

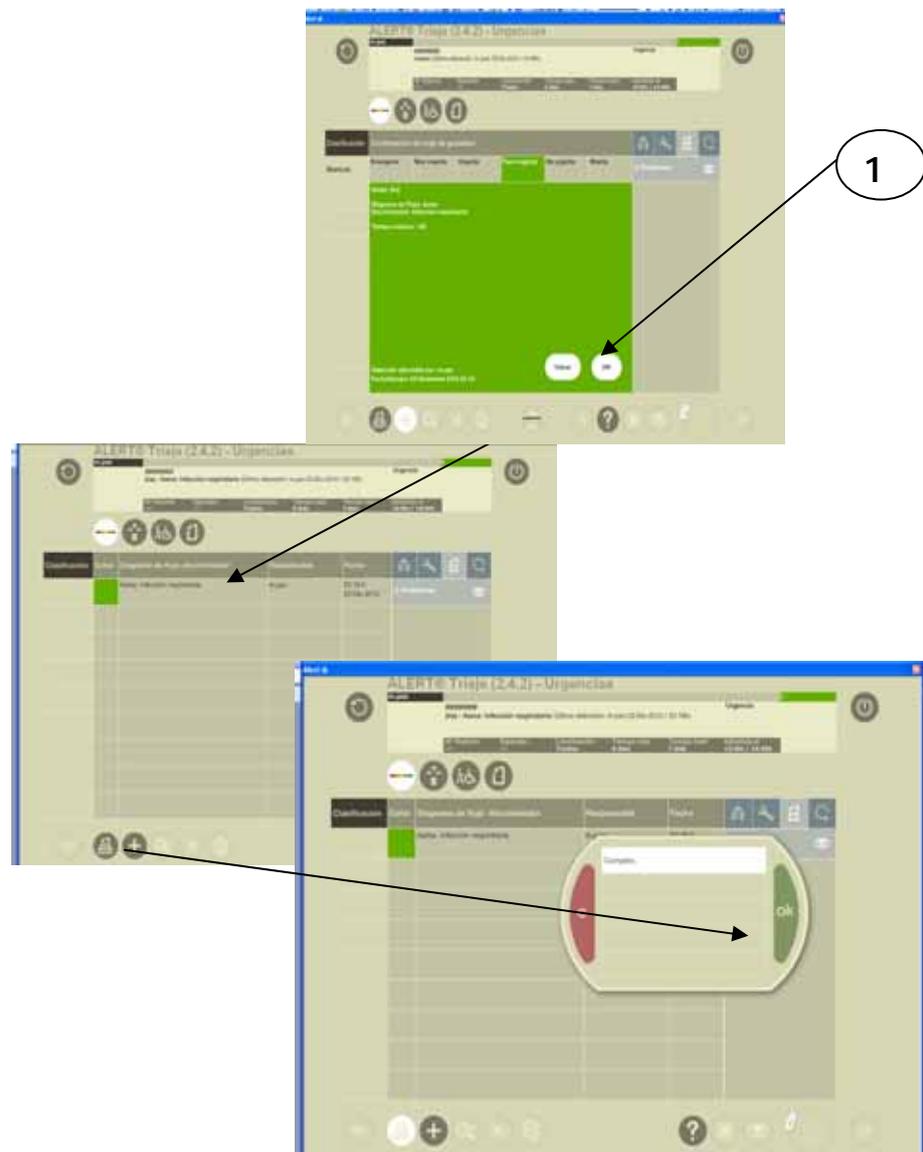

16.- Una vez completado el proceso, pulsamos el botón de  y nos aparece en pantalla la forma que tendrá nuestro informe, volvemos a confirmar que está completo y damos de nuevo a **imprimir**. Nuestro informe estará listo

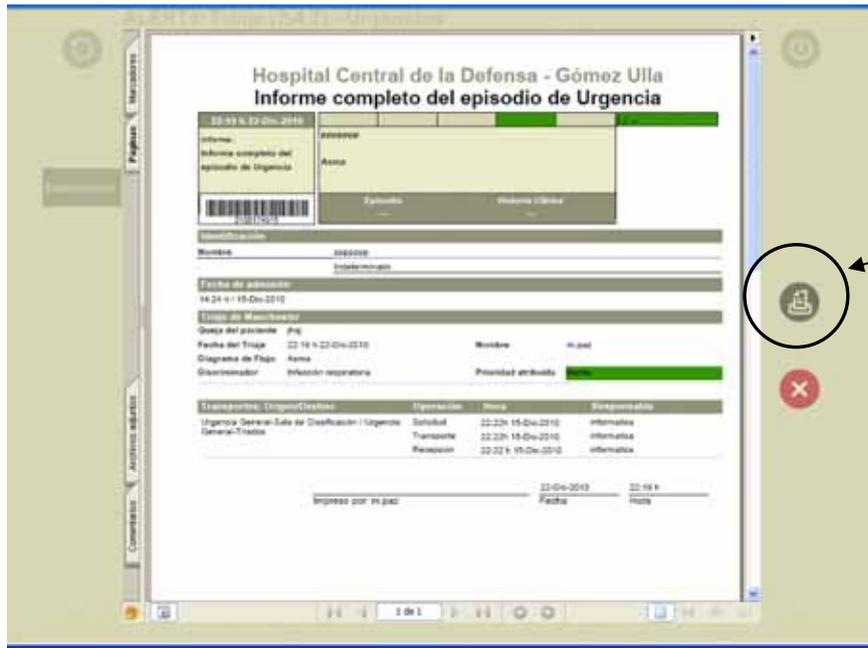

Hospital Central de la Defensa - Gómez Ulla
Informe completo del episodio de Urgencia

Informe:

Informe completo del episodio de Urgencia:

Episodio:

Historia Clínica:

Identificación:

Nombre:

Fecha de admisión:

Clinica de Matriculación:

Genia del paciente:

Fecha del Triaje: Nombre:

Diagnóstico de Triage:

Gobernador: Prioridad atribuida:


Transporte: Origen/Destino	Operación	Hora	Zona/Estado
Urgencia General/Sala de Clasificación / Urgencia	Salud	22:23h 15-Dic-2010	informática
General/Triage	Transporte	22:23h 15-Dic-2010	informática
	Relación	22:23h 15-Dic-2010	informática

Impreso por: 22-10-2010 22:18 h
Fecha Hora

5.-AÑADIR TEXTOS PREESTABLECIDOS

Es una opción que nos permite crear un texto para no tener que escribir siempre lo mismo en las mismas patologías.

1.- Desde la pantalla principal pulsamos el botón herramientas.

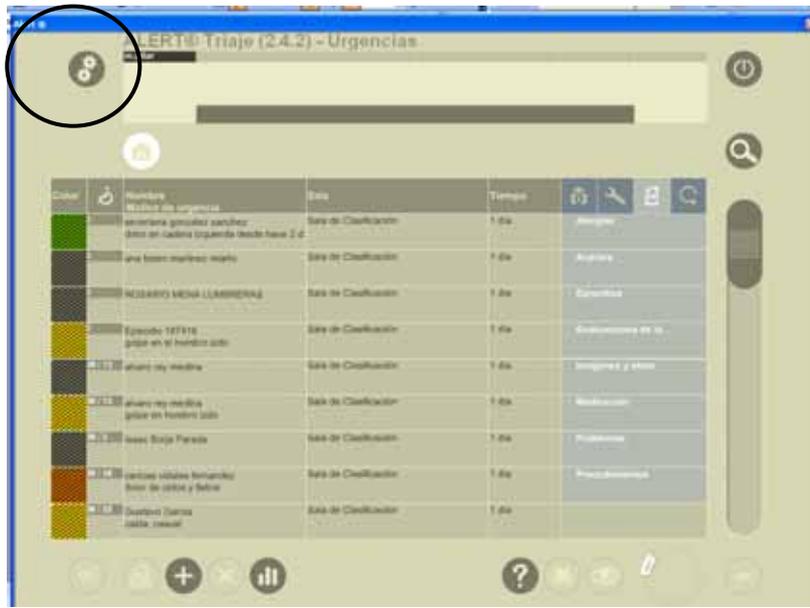


2. Pulsamos el botón de áreas de urgencias



3.- Estamos en el área de **queja de triaje**

En la descripción ponemos como una especie de título genérico sobre el tema de nuestro texto mas frecuente, por ejemplo: **dolor abdominal**, y lo seleccionamos.

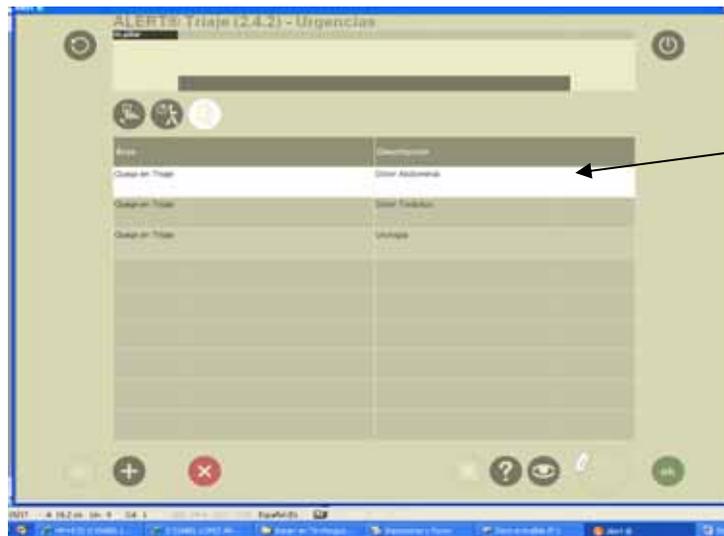


4.- A continuación nos aparece un espacio en blanco donde escribimos el texto que va asociado al título que hemos puesto.

Validamos con **OK**



Este proceso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que añadamos todos los textos que necesitemos, marcando el signo 

5.-Cuando volvamos a triar al siguiente enfermo y seleccionemos el icono de textos frecuentes nos aparecerá el título *"dolor abdominal"* y al pulsarlo se copiará en el espacio "queja del paciente" el texto escrito.

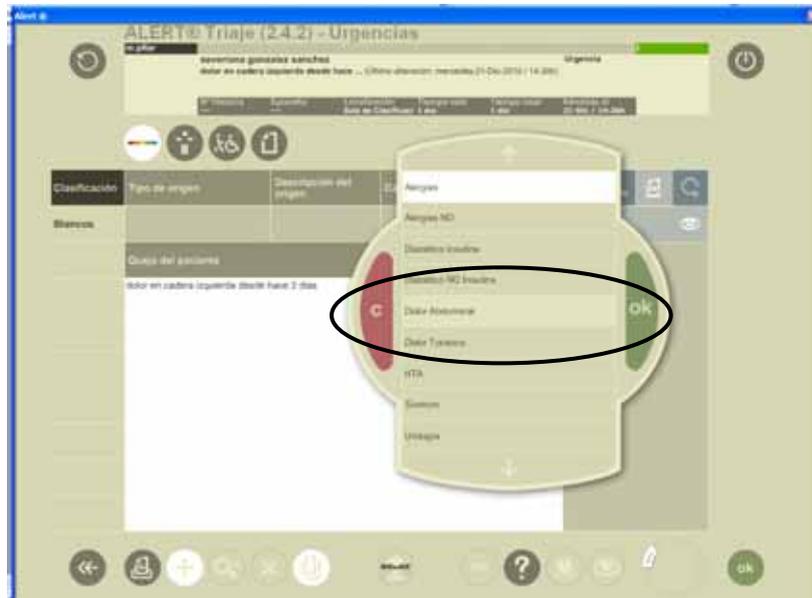

6.-VALORES DE LOS PARAMETROS MÁS UTILIZADOS

SATURACIÓN DE OXIGENO	
MUY BAJA	Menor de 90% con aire ambiental Menor de 95-% con O ₂
BAJA	Menor de 95% con aire ambiental

TEMPERATURA	
MUY CALIENTE	Superior a 41°
CALIENTE	Superior a 38,5°
TEMPLADO	Superior a 37,5°
FRIO	Inferior a 32°

ADULTO MUY CALIENTE, NIÑO CALIENTE, O ENFERMOS FRÍOS (SEA CUAL SEA SU EDAD) SE CATALOGAN COMO MUY URGENTES (COLOR NARANJA)

FRECUENCIA CARDIACA	
BRADICARDIA	Menor de 60 latidos /minuto
TAQUICARDIA	Superior a 120 latidos /minuto
RITMO IRREGULAR	

TENSION ARTERIAL	
HIPERTENSION	Antecedentes de T.A. alta o tensión arterial alta al examen.
HIPOTENSION	Antecedentes de T.A. baja o tensión arterial baja al examen.

GLUCEMIA	
HIPOGLUCEMIA	Inferior a 50 mg/dl
HIPERGLUCEMIA	Superior a 300 mg/dl

Problema reciente: Aquel problema que ha aparecido en la última semana.

Instauración rápida: Problema que lleva 12 horas de evolución o menos.